

## NEUPOREDIVA ESTETIKA

ISKUSTVO POSTIZANJA ESTETSKIH PRIRODNIH REZULTATA, ZAHVALJUJUĆI SPECIJALNO KONTROLISANOJ VELIČINI, OBLIKU I KONFIGURACIJI HARMONIZE'S ART NANOČESTICA:

- DIFUZIJA I REFLEKSIJA SVETLA SLIČNA LJUDSKOJ GLEĐI.
- POBOLJŠAN KAMELEON EFEKAT ZA BOLJE UKLAPANJE.




**2<sup>od</sup>3** STOMATOLOGA SU POTVRDILA DA HARMONIZE IMA BOLJA UKUPNA ESTETSKA SVOJSTVA U POREĐENJU SA KOMPOZITIMA<sup>2</sup> KOJE TRENUTNO KORISTE

<sup>2</sup>18 out of 27 Leading EU Dentists  
Harmonize Field Evaluation EMEA Sept 2016


### REFLEKSIJA SVETLA KAO KOD PRIRODNOG ZUBA

MANJE TALASNE DUŽINE  
- PLAVA BOJA -

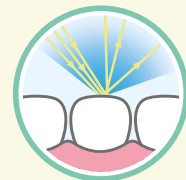

DIFUZNA REFLEKSIJA

VEĆE TALASNE DUŽINE  
- CRVENA BOJA -

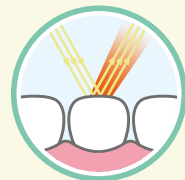

USMERENA REFLEKSIJA


UPRAVO KAO PRIRODNI LJUDSKI ZUBI, A ZA RAZLIKU OD OSTALIH UNIVERZALNIH KOMPOZITA, HARMONIZE SE PRILAGOĐAVA TALASNOJ DUŽINI SVETLA, REFLEKTUJUĆI DIFUZNO SVETLO MANJE TALASNE DUŽINE I USMERENO SVETLO VEĆE TALASNE DUŽINE.

OVI REZULTATI U **BOLJEM UKLAPANJU** SU BOLJI OD VODEĆIH KOMPOZITA KAO ŠTO JE FILTEK SUPREME ULTRA.  
*(internal data available upon request).*

### VISOK SJAJ I POSTOJANO POLIRANJE

VELIČINA ČESTICA I STRUKTURA, TAKOĐE OMOGUĆAVA **LAKŠE POLIRANJE**, I PRI POLIRANJU SA OPTISTEP POLIŠERIMA POKAZALI SU BOLJE I TRAJNIJE REZULTATE OD KONKURENCIJE.<sup>3</sup>

SA DRUGE STRANE, DIZAJNIRANI SU ZA **IZUZETNO ZADRŽAVANJE SJAJA**, ČAK I U POREĐENJU SA VODEĆIM KOMPOZITIMA KAO ŠTO SU TPH SPECTRA, GRANDIOSO I TETRIC EVOCERAM.  
*(internal data available upon request).*

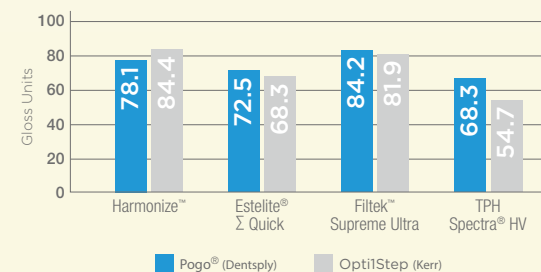

<sup>3</sup>Study conducted at University of Alabama, 2016.

## PRIPREMITE SE DA POVEĆATE NIVO SVOJE UMEŠNOSTI

### Harmonize – Syringe Trial Kit

SADRŽI: 4X 2g Syringe (1x Dentine A3, 1xDentine A3.5, Enamel A2, 1x Enamel A3); Uputstvo za upotrebu

Part No.	Description
36631	Harmonize – Syringe Trial Kit

### Harmonize – Unidose Trial Kit

SADRŽI: 20X 0.25g Unidose (5x Dentine A3, 5xDentine A3.5, 5xEnamel A3), Uputstvo za upotrebu

Part No.	Description
36632	Harmonize – Unidose Trial Kit

### Harmonize – Refill

Shade	1x 4g Syringe	20x 0.25g Unidose
Dentine A1	36545	36571
Dentine A2	36536	36572
Dentine A3	36546	36573
Dentine A3.5	36547	36574
Dentine A4	36548	36575
Dentine B3	36549	36576
Dentine C4	36550	36577
Dentine XL2	36551	36578
Enamel A1	36552	36579
Enamel A2	36537	36542
Enamel A3	36553	36581
Enamel A3.5	36554	36582
Enamel A4	36555	36583
Enamel B1	36556	36584
Enamel B2	36557	36585
Enamel B3	36558	36586
Enamel B4	36559	36587
Enamel C1	36560	36588
Enamel C2	36561	36589
Enamel C3	36562	36590
Enamel C4	36563	36591
Enamel D2	36564	36592
Enamel D3	36565	36593
Enamel D4	36566	36594
Enamel XL	36567	36595
Incisal Translucent Amber	36538	36543
Incisal Translucent Blue	36568	36597
Incisal Translucent Clear	36569	36598
Incisal Translucent Gray	36570	36599
Incisal Translucent SuperClear*	36539	Not Available

\* 3g Syringe

### Harmonize – Syringe Intro Kit

SADRŽI: 4X 4g Syringe (1x Dentine A3, 1xDentine A3.5, 1xEnamel A2, 1xEnamel A3), Uputstvo za upotrebu

Part No.	Description
36633	Harmonize – Syringe Intro Kit

### Harmonize – Unidose Intro Kit

SADRŽI: 40X 0,25g Unidose (10x Dentine A3, 10xDentine A3.5, 10xEnamel A2, 10xEnamel A3), Uputstvo za upotrebu

Part No.	Description
36634	Harmonize – Unidose Intro Kit

### Harmonize – Syringe Advanced Kit

SADRŽI: 8X 4g Syringe (1x Dentine A2, 1xDentine A3, 1xDentine A4, 1xEnamel A2, 1xEnamel A3, 1x Incisal Clear, 1x Incisal Gray); Uputstvo za upotrebu

Part No.	Description
36635	Harmonize – Syringe Advanced Kit

### Harmonize – Unidose Advanced Kit

SADRŽI: 80X 0.25g Unidose (10x Dentine A2, 10xDentine A3, 10xDentine A4, 10xEnamel A2, 10xEnamel A3, 10x Incisal Amber, 10x Incisal Clear, 10x Incisal Gray); Uputstvo za upotrebu.

Part No.	Description
36636	Harmonize – Unidose Advanced Kit

Harmonize, Herculite i Opti1 Step su ranije registrovane marke ili robne marke Kerr korporacije u Americi i /ili drugim zemljama. Sve ostale marke su imovina njihovih cenjenih vlasnika



ISKUSTVO NOVE GENERACIJE  
KOMPOZITI KOJI POVEĆAVAJU VAŠU  
**UMEŠNOST**



## SAVRŠENE PRIRODNE RESTAURACIJE ZAHTEVAJU VAŠ DODIR I ART

HARMONIZE ZAPOČINJE SA UMETNOŠĆU (ENG. **ART-ADAPTIVE RESPONSE TECHNOLOGY**), MREŽA NANOČESTICA PUNIOCA OMOGUĆAVA POSTIZANJE **PRIRODNOG IZGLEDA RESTAURACIJA** LAKŠE NEGO RANIJE.

ART TAKOĐE OMOGUĆAVA **BOLJE UKLAPANJE NIJE NEOPHODNA DODATNA OBRADA I POSTIZANJE JEDINSTVENE STRUKTURE**, OBEZBEĐUJUĆI VAŠOJ RESTAURACIJI IZUZETNU JAČINU I NEUPOREDIVU ESTETIKU.

## NAUKA I LEPOTA NAJZAD DOLAZE ZAJEDNO

## LAKŠE RUKOVANJE

OSETITE LAKŠI NAČIN DA IZMODELUJETE ANATOMIJU VAŠEG KOMPOZITA, OD KOMBINACIJE HARMONIZE JEDINSTVENIH, SFERIČNIH **ART** NANOČESTICA I PATENTIRANIH MODIFIKATORA DEFORMACIJE

- **PRILAGODLJIVA VISKOZNOST TOKOM APLIKOVANJA**, KOJA ZAVISI OD PRITISKA PRIMENJENOG INSTRUMENTOM.
- **MINIMALNA LEPLJIVOST BEZ SLEGANJA MATERIJALA** NIJE NEOPHODNA DODATNA OBRADA.


**94%** VODEĆIH STOMATOLOGA OCENILI SU HARMONIZE KAO ODLIČAN ZA RUKOVANJE<sup>4</sup>

<sup>4</sup> In a blind evaluation, 94% of leading US dentists stated Harmonize had excellent handling characteristics including stickiness, carvability, spreadability, and viscosity.

## IZUZETNA JAČINA

RAČUNAJTE NA TRAJNE RESTAURACIJE, ZAHVALJUJUĆI **OJAČANOJ MREŽI PUNIOCA** KREIRANOJ NA INTERAKCIJI HARMONIZE ART NANOČESTICA:

- **POVEĆANA JAČINA**, ZAHVALJUJUĆI VISOKOM PROCENTU PUNIOCA (81% PUNJENJA).
- **JAČA VEZA IZMEĐU SMOLE I PUNIOCA**, ŠTO OBEZBEĐUJE TRAJNE PERFORMANSE.

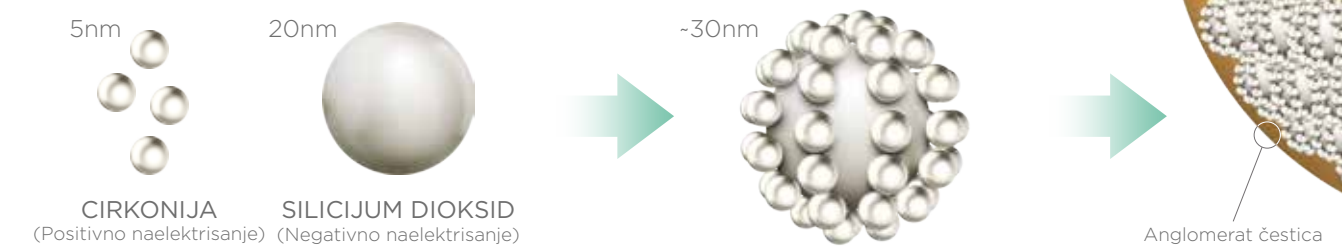

**2<sup>od</sup>3** STOMATOLOGA RAZMATRAJU  
KOJE PRELAZAK SA KOMPOZITA  
NA **HARMONIZE**<sup>1</sup> KORISTE  
TRENUTNO



<sup>1</sup> 18 out of 27 Leading EU Dentists - Harmonize Field Evaluation EMEA Sept. 2016

### DINAMIČNA VISKOZNOST

MREŽA ART NANOČESTICA PUNIOCA **PRILAGOĐAVA SE NAVIKAMA KLINIČARA**:

JEDINSTVENI **MODIFIKATOR DEFORMACIJE** OMOGUĆAVA TEČNIJU KONZISTENCIJU TOKOM MODELovanja, ČINEĆI **LAKŠIM OBLIKOVANJE KOMPOZITA**.


KADA JE MODELovanje ZAVRŠENO, VISKOZNOST SE POVEĆAVA, **SPREČAVAJUĆI SLEGANJE MATERIJALA**.

**SVE OVO UMANJUJE NAPOR DA SE POSTIGNE ŽELJENI OBLIK**, SMANJUJUĆI VREME POTREBNO ZA ZAVRŠNU OBRADU I POLIRANJE ISPUNA. *(internal data available upon request).*


### SFERIČAN OBLIK

SFERIČNI OBLIK ART MREŽE PUNIOCA JE PAŽLJIVO KONTROLISANA KAKO BI POVEĆALA PUNJENJE, **SMANJILA LEPLJIVOST I POJEDNOSTAVILA OBLIKOVANJE**

OVO REDUKUJE RIZIK OD KONTRAKCIJE MATERIJALA I LOŠEG RUBNOG ZATVARANJA.

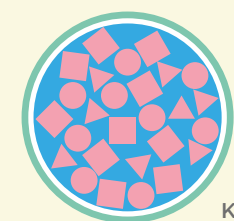

KONKURENCIJA

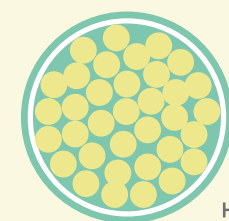

HARMONIZE

### DINAMIČNA VISKOZNOST


VEOMA MALE SFERIČNE ČESTICE SILICIJUM DIOKSIDA I CIRKONIJE POVEZANE ZAJEDNO I SPOJENE U OJAČANU STRUKTURU

OVO POBOLJŠANJE INTERAKCIJE I UKRŠTANJE IZMEĐU MREŽE PUNIOCA I SMOLE, REZULTIRA **MNOGO EFIKASNIJOM POLIMERIZACIJOM I VEĆOM JAČINOM**.

KAO REZULTAT, MOŽETE SE OSLOMITI NA DUGOTRAJNIJE RESTAURACIJE, KOJE **ODOLEVAJU ODLAMANJU I FRAKTURAMA TOKOM VREMENA**.

### SFERIČAN OBLIK

HARMONIZE POKAZUJE **BOLJU ČVRSTOĆU** OD FILTEK SUPREME ULTRA, TETRIC EVOCERAM, ESTELITE SIGMA QUICK I ADMIRA FUSION.

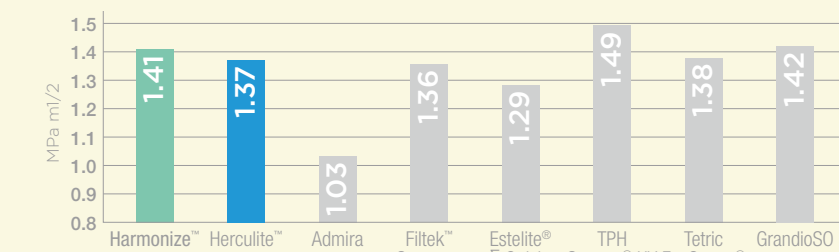

(internal data on file.)